



<http://www.unisis.co.jp>



大・中動物用

ディスポーザブル 動物用注射針

DISPOSABLE VETERINARY NEEDLE FOR ANIMALS



14G×51mm



動物用注射針

大動物への薬液投与などをはじめ、多目的な用途に使うことができる 大口径の動物用注射針


硬く厚い皮膚をもつ大動物への穿刺をスムーズに行うため、ユニシスでは独自の技術や製法を採用し、安定感のある注射針を作り出しました。実際に使用する現場の声を忠実に反映させた注射針は、使用する術者の満足を得ることができるものと考えております。

特徴

●抜け防止機能


大動物に対する薬液投与では、穿刺した針が徐々に脱落するなどのトラブルの発生があります。

ユニシスでは針基付近の表面を粗面として針の滑り止め機能を付加しました。

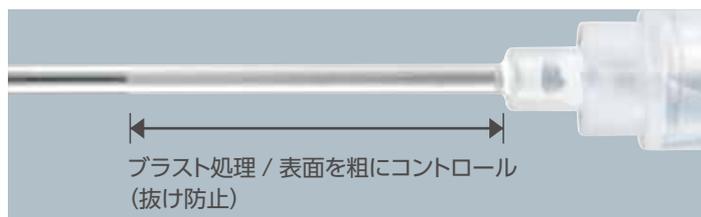


●穿刺性能

大動物の皮膚は厚く、またデリケートなので穿刺性能が極めて重視されます。大口径の針にも関わらず、高い穿刺性能(鋭い切れ味)を持っています。

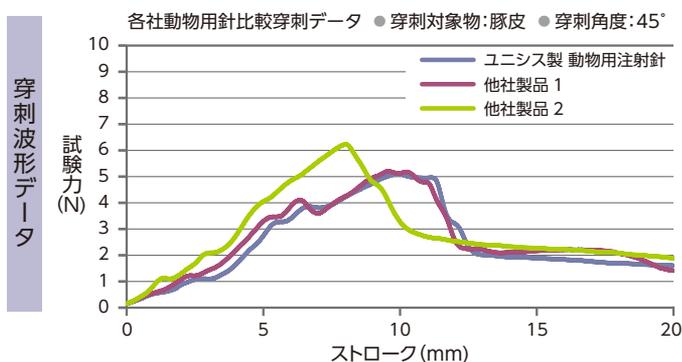


各部名称および略図

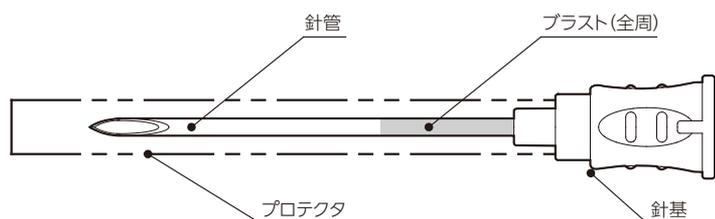

針先の形状

針先はオーソドックスなランセットポイントです。大動物の厚い皮膚に対して穿刺をするために先端角度は動物用に合わせて研磨されています。

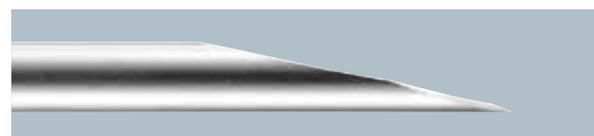

ランセットポイント (横から)



ランセットポイント (斜めから)

針基

針基は50基という径の大きな特殊な形状をしています。これにより動物以外への誤使用を防ぎ、かつ大量の薬液投与を可能としています。

※通常のシリンジへの接続はできません。



標準提供サイズ

[製品名称] 動物用注射針

ゲージ	長さ	製品コード
14G	51mm(2")	A0001700

・包装・出荷単位: 100本/箱

・販売名: 動物用注射用針

・E.O.G.滅菌済

・動物用一般医療機器

※上記標準品以外のご要望は、営業担当までお問合せ下さい

お問合せ先



〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル7階

営業推進部直通: TEL.03-5812-7766 FAX.03-5812-8831

ユニシスウェブサイト >>> <http://www.unisis.co.jp>

(製造販売元) 株式会社 ユニシス 埼玉工場

取扱店