


<http://www.unisis.co.jp>

ディスポーザブル 動物用輸液チューブセット

DISPOSABLE VETERINARY INFUSION SETS



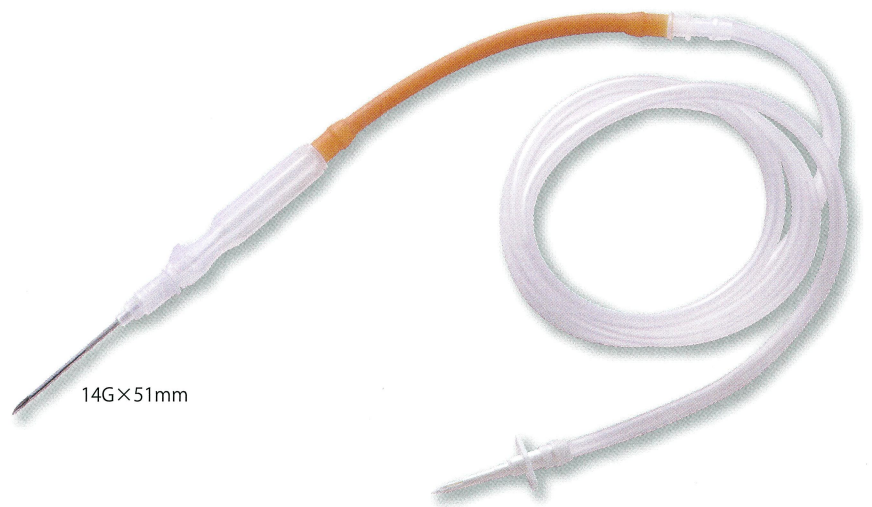

動物用輸液チューブセット

牛の補液・輸液は勿論、馬の首ふりや患畜の急な動きにも強い動物用輸液チューブセットが登場。

注射針の後端側に抜け防止加工を施しているため、治療中の針のズレ、脱落を気にすることなく安心してお使いいただけます。


握り易さを追求したアダプタは、針全体に力を加えることができ、安定した穿刺が可能となります。

*針基には50基を採用し、大きな流量を確保しました。

特徴

●抜け防止機能


針の後端側の表面を粗面に加工しました。患畜の急な動きや、チューブの重みによる針のずれ・脱落を防ぎ、安定した留置を可能とします。

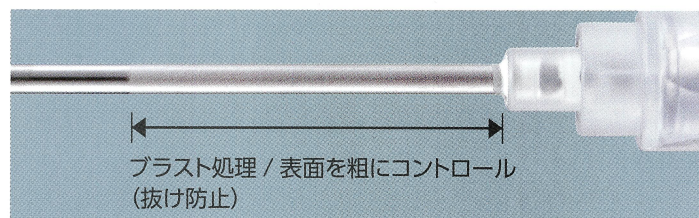


●穿刺性能

大動物の皮膚は厚いため、高い穿刺性能が求められます。ユニシスでは大口径と高い穿刺性の両立にこだわり注射針の設計を行いました。

実際に豚皮への穿刺試験を実施し、他社製品と同等ないしはそれ以上の穿刺性能を確認しております。

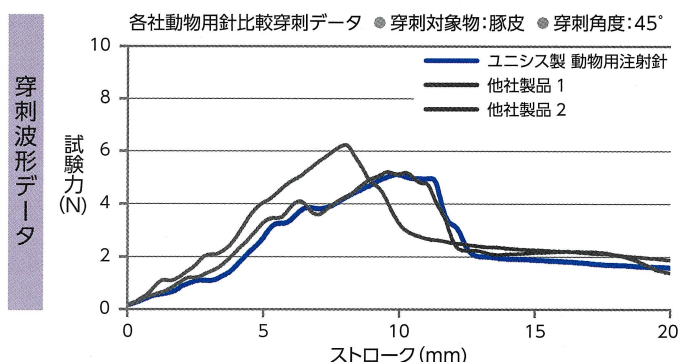

各部名称および略図

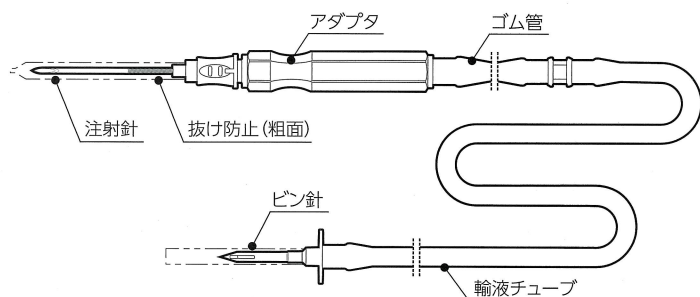

お問合せ先

株式会社 ユニシス

〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル7階
TEL.03-5812-8830 FAX.03-5812-8831

ユニシスウェブサイト >>> <http://www.unisis.co.jp>


〔製造販売元〕株式会社 ユニシス 埼玉工場

針先の形状

針先はランセットポイントを採用し、先端角度は動物に合わせて鋭利に研磨を行っております。




ランセットポイント (横から)

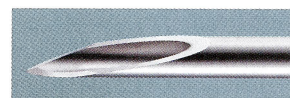

ランセットポイント (斜めから)


アダプタ

アダプタはブレなく針先にスムーズに力が伝わるよう握りやすさにこだわりました。また、刃面の向きを指すマークにより、刃面の向きを一見で確認できます。

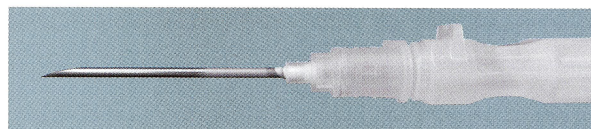

輸液チューブ

輸液チューブは常に安定した輸液と操作性を維持するため、折り曲げによる閉塞を起こしにくい柔軟な素材の選定を行いました。

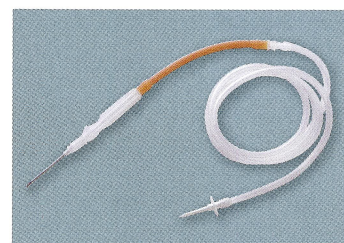

標準提供サイズ

[製品名称] 動物用輸液チューブセット

注射針		製品全長	製品コード
ゲージ	長さ		
14G	51mm	1900mm	A0020700

- ・包装単位:25セット/箱
 - ・販売名:動物用輸液チューブセット
 - ・E.O.G.滅菌済
 - ・動物用一般医療機器
- ※上記標準品以外のご要望は、営業担当までお問合せ下さい

代理店