


<http://www.unisis.co.jp>

エピソードラル シミュレータ

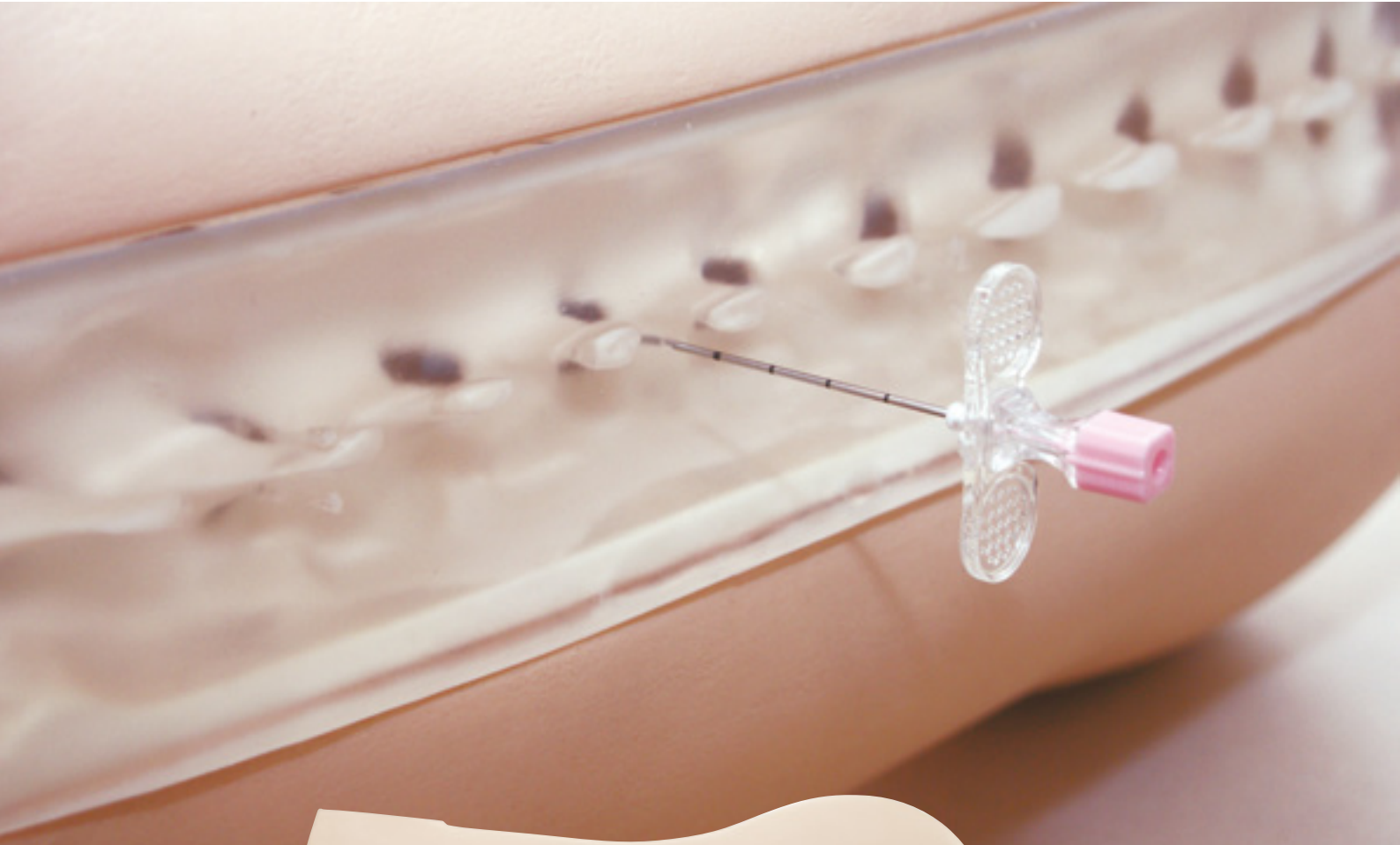

「安全」な穿刺手技の学習教育に役立つシミュレータキット


「シミュレータから臨床へ」皮膚のリアルな穿刺感覚、生体に近い硬膜刺入感を備えた胸部を主とした硬膜外麻酔用の穿刺トレーニングツールです。

UNISIS オリジナルの硬膜外穿刺パッドの他、硬膜外穿刺針をはじめとする硬膜外麻酔キットを付属しています。

特徴

UNISIS オリジナル硬膜外穿刺パッド

穿刺パッドは人体に近い感触を備え、硬膜外穿刺時の黄色靭帯を貫き、硬膜外腔に刺入する感覚を得る事ができます。椎体の間隔が狭く穿刺難易度が高い胸椎部における硬膜外麻酔の練習に適しています。UNISISオリジナルの穿刺パッドは、リアルな硬膜外腔を再現し、カテーテルの挿入や抵抗消失法の練習も可能です。

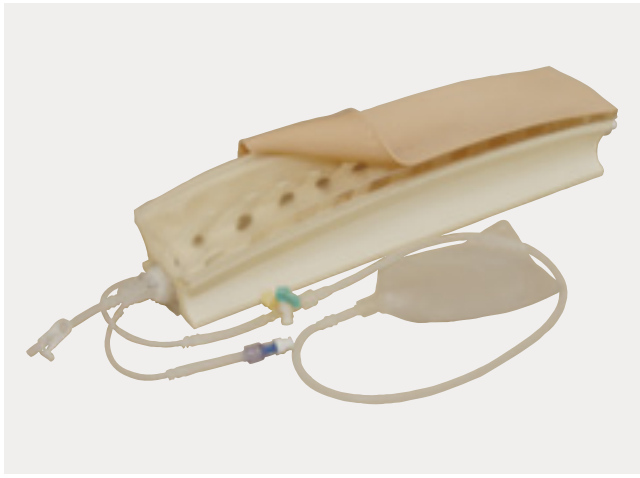

穿刺体位

側臥位用の固定台に加え、ユニシスオリジナルの座位用の固定台を採用することで、様々な体位での穿刺が行えます。




付属品

硬膜外麻酔針をはじめ、硬膜外カテーテルやL.O.R.シリンジまで、穿刺からカテーテルの留置までに必要な付属品を揃えたことで、一貫した手技の練習が可能です。



各部名称

硬膜外穿刺パッドをセットした状態

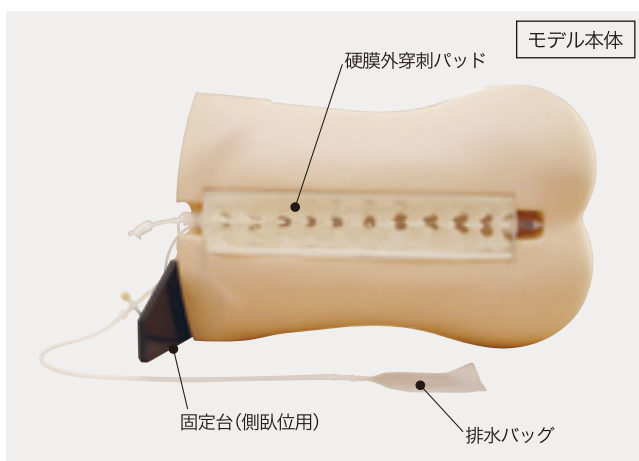

仕様

エピドラルシミュレータ キット構成

構成	数量	構成	数量
エピドラルシミュレータ 本体	1	シミュレータ用硬膜外麻酔針	各5
硬膜外穿刺パッド(胸椎用)	3	ヒューバーポイント	
硬膜外穿刺パッド用排水バッグ	1	・17G80mm(内針樹脂)	
固定台(側臥位、座位)	各1	・18G80mm(内針樹脂)	
シリンジ(50ml)	1	・20G80mm	
マニュアル	1	・22G80mm	
L.O.R. シリンジ 5ml	1	※未滅菌品となります	
硬膜外カテーテルセット	1		

穿刺パッド等の消耗品については、(株)ユニシスにご購入元にお問い合わせ下さい。

お問合せ先



〒110-0016 東京都台東区台東 4-11-4 三井住友銀行 御徒町ビル7F
(国内営業部直通) Tel:03-5812-7768 Fax:03-5812-7769

ユニシスウェブサイト <http://www.unisis.co.jp>

取扱店