



<https://www.unisis.co.jp>

UNIEVER[®]

Uniever is a brand name of Unisis Corp.

ディスポーザブルシリンジ (ローデッドスペースタイプ)

DISPOSABLE SYRINGE (LOW DEAD-SPACE TYPE)



ディスポーザブルシリンジ(ローデッドスペースタイプ)

シンボルマーク



ロックタイプ
(ローデッドスペース)


外筒に残る薬液を最小限にするシリンジ

外筒(バレル)と押し子(プランジャー)の先端が精密な合わせになっているため、筒先に残る薬液を最後まで押し出すことが可能です。高価な薬液を無駄にすることなくご使用いただけます。

特徴

ローデッドスペース設計



一般的なシリンジと比べ、外筒(バレル)と押し子(プランジャー)の先端がデッドスペースを極小とする構造にしている為、薬液を最後まで押し出すことができ、筒先に残る薬液を最小限にすることが可能です。

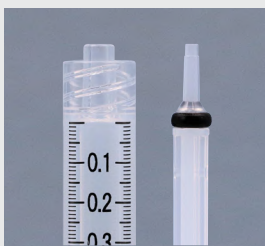

【シリンジ(ローデッドスペースタイプ)】



【他社製シリンジ】

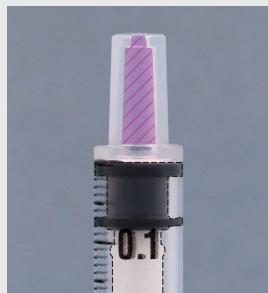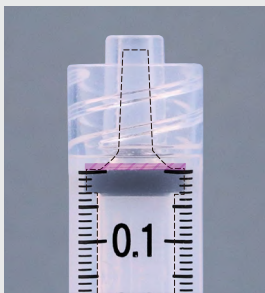

残薬液

ロックタイプ

ルーアロックタイプのシリンジの為、粘度の高い薬液(ヒアルロン酸等)をご使用の場合でも、接続部が外れることなく、安心してご使用いただけます。




手掛け(オプション)

外筒のフランジにより大きな手掛けを取り付けることが可能です。より確実にシリンジを保持することができるため、操作性が向上します。



手掛けなし


手掛けあり

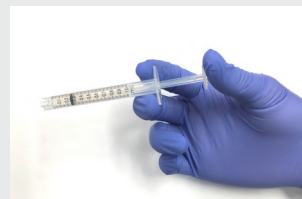

手掛けは10個入り/袋で販売しております。
(バルク・未滅菌)

各部名称および略図

シリンジ(ローデッドスペースタイプ)

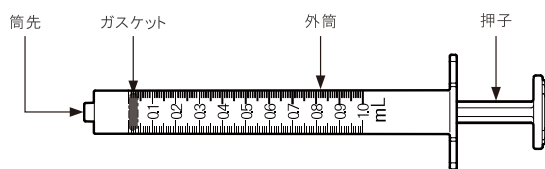

標準提供サイズ

【製品名称】ディスポーザブルシリンジ(ローデッドスペースタイプ)

| 仕様 | 品目コード |
|----------|---------|
| 1mL(ロック) | 511097A |

- 包装単位: 100本/箱
- 販売名: UNIEVER注射筒
- E.O.G滅菌済み

薬事届出番号 11B1X00028000002

お問合せ先



〒110-0016 東京都台東区台東 4-11-4 三井住友銀行 御徒町ビル7F
Tel: 03-5812-7768(国内営業部直通) Fax: 03-5812-7769

ユニシスウェブサイト <https://www.unisis.co.jp>

【製造販売元】株式会社 **ユニシス** 埼玉工場

取扱店

※本カタログの仕様・形状は、製品改良等の理由により予告なしに変更することがあります。